



自動サンプル処理の新しい“かたち”

QIAcube[®] Connect


— QIAGEN[®] サンプルテクノロジーを網羅した新しい自動化装置 —



サンプル処理を標準化

QIAcube Connect ワークテーブル


- ① 最大 12 サンプルを遠心分離
- ② 3 チップ / 酵素ラックで容易に装填
- ③ サンプルチューブホルダー / シェーカー
- ④ 試薬用ボトルラック
- ⑤ センサー搭載ロボットアーム
- ⑥ 除染用 UV ライト

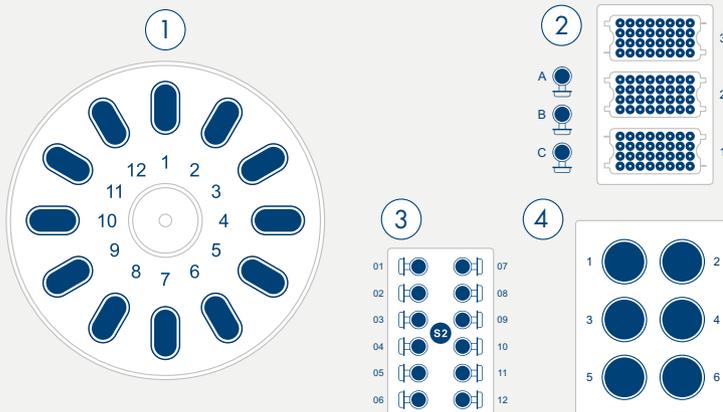

自動化プロセス



キットのバーコードとサンプル ID を
スキャンし、データをインポート

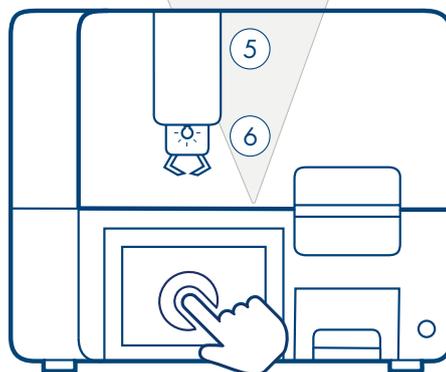

操作ガイド付きのソフトウェアにより、
自動サンプル処理も簡単操作



(オプション)
専用アプリで装置をモニター



QIAcube Connect は、核酸及びタンパク質のサンプル処理で使う QIAGEN スピнкаラムの溶解、結合、洗浄、溶出ステップを自動化することができます。また対応するキットは 80 以上、必要に応じてカスタムプロトコールもご利用いただけます。

QIAcube Connect により、研究者は貴重な生物的発見に自信を高めると同時に、作業の安全性、内蔵型の UV ライトによる除染、デジタル化された作業フロー、サンプル追跡システム、そして事前確認機能でサンプル処理効率の向上など、多くの機能を手に入れることができます。

これにより、作業の標準化と自動化へのスムーズな移行が可能となり、手動によるサンプル処理から解放されます。

オプションの専用アプリ QIAsphere で装置を遠隔モニター

装置から離れていても状態を確認

QIAcube Connect を離れたところからでもモニタリングすることができ、装置に異常が生じた場合でも、それらを通知させることができます。

効率的に装置を運用


机の上からいつでも装置のステータスが確認できるため、装置を効率よく運用することができます。



QIAsphere



www.qiagen.com/qiasphere

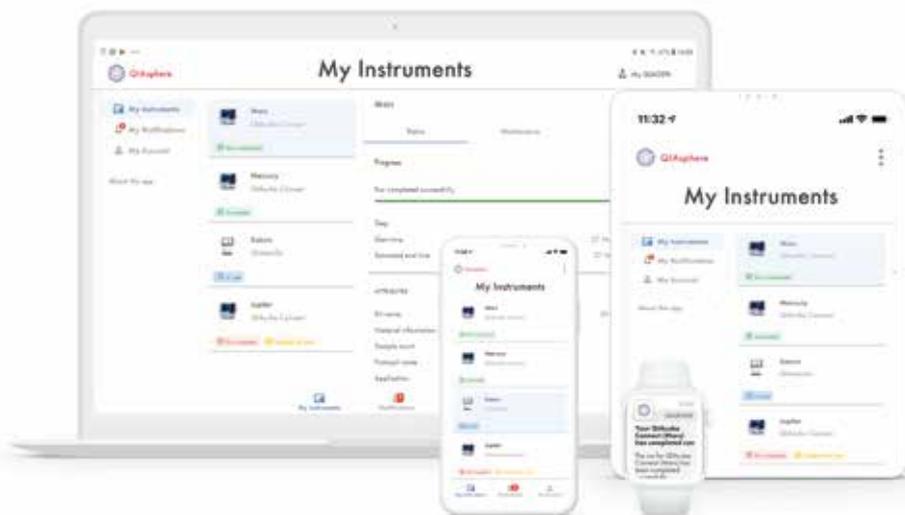


QIAsphere は、施設内のネットワークを使用して QIAcube Connect とアプリをインストールしたご自身の端末を LAN 接続することができます。インストールする端末の性質上、施設外からも接続することが可能な場合があるため、本ソフトウェアの使用にあたっては、事前に施設内のネットワーク管理者にご相談いただくことをおすすめいたします。

QIAsphere アプリ（無償）のネットワーク設定作業は、弊社のサポート対象外となります。



QIAcube Connect によるワークフローの簡略化

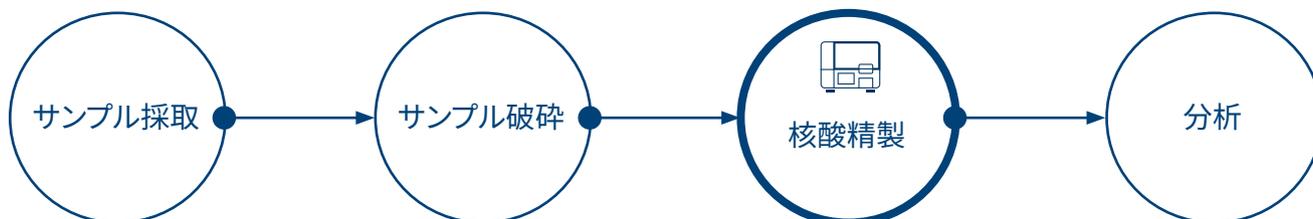

QIAcube は 80 以上の QIAGEN キットの自動化が可能で、3000 以上の実績あるプロトコルを用いて複雑化するサンプル管理をサポートします。

詳細については www.qiagen.com/QIAcubeconnect をご覧ください。

オーダーインフォメーション

製品	内容	Cat. no.
QIAcube Connect System FUL-1	装置本体、設置・基本取扱説明、製品保証（1年間）および製品点検（保証期間内に1回）を含む	9003077
QIAcube Connect System FUL-2	装置本体、設置・基本取扱説明、製品保証（2年間）および製品点検（保証期間内に2回）を含む	9002873
QIAcube Connect System FUL-3	装置本体、設置・基本取扱説明、製品保証（3年間）および製品点検（保証期間内に3回）を含む	9002870
Starter Pack, QIAcube	200 µl Filter-tips (1024); 1000 µl Filter-Tips (1024); 30 ml Reagent Bottles (12); Rotor Adapters (240); Rotor Adapter Holder; 1.5 ml Elution Tubes (240) を含む	990395

* 本製品パッケージには、タブレット等のデバイス、QIASphere アプリおよび LAN 接続のためのネットワークアダプターは含まれていません。

† QIASphere アプリ（無償）のネットワーク設定作業は、弊社のサポート対象外となります。

最新のライセンス情報および製品ごとの免責事項については、各 QIAGEN キットの Handbook または User Manual をご覧ください。QIAGEN キットの Handbook および User Manual は www.qiagen.com から入手されるか、QIAGEN テクニカルサービスまたはお近くの代理店へお問い合わせください。

Trademarks: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAcube® (QIAGEN Group). 本文に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

製品情報、仕様、カタログ番号（Cat. no.）、価格等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。2302686 4/2021 © 2021 QIAGEN, all rights reserved.

株式会社 キアゲン | 〒104-0054 | 東京都中央区勝どき3-13-1 | Forefront Tower II
Tel:03-6890-7300 | Fax:03-5547-0818 | E-mail:techservice-jp@qiagen.com | www.qiagen.com